



No Deje Pasar más Tiempo
para Recuperar su Sonrisa...



Para obtener más
información sobre los
implantes dentales,
escanee el código
con su Smartphone.

*...Pida soluciones de
implantes dentales
BIOMET 3i*

BIOMET 3i[™]
PROVIDING SOLUTIONS - ONE PATIENT AT A TIME[™]



Como director general en una importante empresa financiera, me relaciono constantemente con otros altos ejecutivos. Tras la pérdida de algunas piezas dentales a causa de una enfermedad periodontal, me sentía incómodo cuando me encontraba frente a mis colegas. Temiendo acabar con una dentadura postiza, consulté a mi odontólogo sobre cuáles podrían ser las opciones disponibles. Mi odontólogo me recomendó los implantes dentales como la mejor solución para la sustitución permanente de mis piezas dentales naturales. El procedimiento fue simple y en unas pocas semanas ya lucía una sonrisa flamante. Ya no me siento incómodo y puedo estar frente a mis colegas con absoluta confianza. La inversión valió la pena.

¿Por qué implantes dentales?

Los implantes dentales están diseñados para brindar una solución duradera ante la pérdida de las piezas dentales naturales y requieren de los mismos cuidados que estas: hilo dental y cepillado.

BIOMET 3i® ofrece una de las gamas más completas de implantes dentales y pilares para implantes dentales, además de una creciente gama de productos para la preparación del lecho y productos de regeneración con soluciones estéticas excelentes.

Los Implantes Dentales:

Pueden Mejorar su Calidad de Vida

- No necesitará incómodos adhesivos
- Fáciles de cuidar

Ayudan a Preservar los Contornos Faciales Naturales

- Ayudan a evitar la pérdida de hueso oral, manteniendo los contornos faciales naturales

Están Diseñados para Mejorar su Salud

- Mejoran la masticación
- Puede disfrutar más de las comidas que le gustan
- Una nutrición mejorada

Pueden Ayudarle a Tener más Confianza en sí Mismo

- Poseen la apariencia y la sensación de los dientes naturales
- Le devuelven la autoestima y la confianza en sí mismo

El cuidado de las prótesis sin implantes dentales, como dentaduras postizas convencionales, puede resultar mucho más incómodo, ya que se debe retirar la dentadura y utilizar dispositivos orales adicionales, como los cepillos interdentes.

Los implantes dentales pueden ser la opción de tratamiento más avanzada para la sustitución de las piezas dentales naturales perdidas y están diseñados como una solución duradera, para lucir una hermosa sonrisa. Con los implantes dentales usted podrá sonreír, hablar y comer con más comodidad y aumentar la confianza en sí mismo.



En nuestra familia, compartir la cena con mis hijos, sus esposas y los nietos es una tradición. Sin embargo, con las dentaduras postizas, las comidas se convirtieron en un momento doloroso, incómodo, que comencé a evitar. Hace poco, cambié la dentadura postiza por implantes dentales. Ahora puedo disfrutar de las comidas que me gustan, sin dolores y sin situaciones incómodas.

Opciones de tratamiento con implantes dentales


Los implantes dentales están considerados en la actualidad como el estándar de tratamiento para la sustitución de las piezas dentales naturales, ya que ofrecen una mejora en su salud, un aspecto mejorado, mayor confianza en sí mismo y mejor calidad de vida.




Implante/Corona un implante dental que sustituye una raíz dental natural perdida.



Dentaduras Implanto-retenidas están sujetas sobre dos o más implantes dentales mediante anclajes.

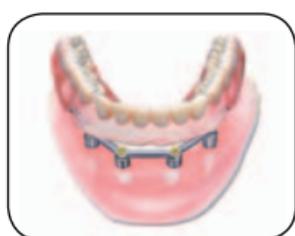

Dentaduras Soportadas mediante Barras sobre Implantes están sujetas a una barra de soporte hecha a medida mediante anclajes con clips.

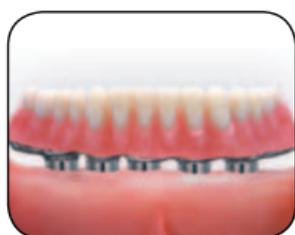

Dentaduras Fijas Implanto-soportadas son fijaciones permanentes que sirven para sustituir las piezas dentales naturales.

Consulte siempre a su odontólogo sobre cuáles son las mejores opciones de tratamiento para usted.



¿Yo podría colocarme implantes dentales?

Sólo su odontólogo puede saberlo, pero la mayoría de los pacientes pueden ser tratados con implantes dentales. Su odontólogo realizará una evaluación cuidadosa, mediante un examen visual y radiográfico y le proporcionará recomendaciones específicas sobre el tratamiento más adecuado para sustituir sus piezas dentales perdidas. Consulte hoy a su odontólogo para obtener más información sobre cómo podría beneficiarse con los implantes dentales.

Para obtener más información sobre los implantes dentales de **BIOMET 3i**™ y los últimos avances tecnológicos en el tratamiento con implantes dentales, visite **www.biomet3ismile.com**.

¿Existen Riesgos Asociados a los Implantes Dentales?

Precauciones de procedimiento y Rehabilitaciones:

El período de cicatrización varía dependiendo de la calidad ósea del lecho del implante, de la respuesta del tejido ante el dispositivo implantado y de la evaluación por parte del cirujano de la densidad ósea del paciente en el momento del procedimiento quirúrgico. Debe evitarse aplicar una fuerza excesiva al implante dental durante el período de cicatrización. En las rehabilitaciones con implantes dentales deberá evaluarse que la oclusión es la adecuada con el fin de evitar cargas excesivas sobre ellos.

Reacciones adversas posibles: Entre los efectos adversos potenciales relacionados con el uso de implantes dentales se encuentran:

- Fracaso de la integración
- Pérdida de la integración
- Dehiscencia que requiera injerto óseo
- Perforación del seno maxilar, del borde inferior, de la cortical lingual, de la cortical vestibular, del conducto dentario inferior y de la encía
- Hiperplasia
- Dolor persistente, entumecimiento o parestesia
- Infección manifestada por: absceso, fístula, supuración, inflamación o radiolucidez
- Pérdida ósea excesiva que requiera intervención
- Rotura o fractura del implante
- Infección sistémica

Indicaciones/Contraindicaciones

Indicaciones de uso: Los implantes dentales están concebidos para ser colocados quirúrgicamente en el maxilar superior o inferior con el fin de proporcionar un medio de fijación de prótesis en restauraciones dentales unitarias y en zonas parcial o totalmente edéntulas con varios dientes, utilizando carga diferida o inmediata, o como pilar definitivo o intermedio para puentes fijos o removibles y para la retención de sobredentaduras.

Los implantes dentales OSSEOTITE® y NanoTite™ de BIOMET **3i** están diseñados para ofrecer una función inmediata en aplicaciones dentales unitarias y/o múltiples cuando se ha obtenido una buena estabilidad primaria, con una carga oclusal apropiada, a fin de restituir la función de masticación.

Contraindicaciones: La colocación de implantes dentales puede tenerse que descartar si el paciente presenta afecciones que contraindiquen el empleo de cirugía. Los implantes dentales BIOMET **3i** no deben colocarse en pacientes en los que el hueso maxilar sea insuficiente y no permita proporcionar una estabilidad adecuada del implante.

BIOMET 3i™ es líder en la fabricación de
implantes dentales, pilares y productos
relacionados con esta terapia.
La empresa mantiene su compromiso
de desarrollar tecnología y servicios
para satisfacer las necesidades,
siempre cambiantes, de los pacientes.

BIOMET 3i Dental Ibérica
WTC Almeda Park, Ed. 1, Planta 1ª
Pl. de la Pau, s/n
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 902-34-34-31
www.biomet3i.com

EC REP

BIOMET 3i
Europe, Middle East & Africa
WTC Almeda Park, Ed. 1, Planta 1ª
Pl. de la Pau, s/n
08940, Cornellà de Llobregat
(Barcelona) Spain
Phone: +34-93-470-55-00
Fax: +34-93-371-78-49

OSSEOTITE es una marca registrada
y NanoTite y Providing Solutions - One
Patient At A Time y su logotipo son marcas
comerciales de BIOMET 3i LLC. BIOMET
es una marca registrada y BIOMET 3i y
su logotipo son marcas comerciales de
BIOMET, Inc. ©2011 BIOMET 3i LLC.
Todos los derechos reservados.



ART1154S

REV A 05/11